

# COLCHÓN EN ESPUMA VISCOELÁSTICA

## **ALOVA**<sup>®</sup>

Monobloc, multizona  
**con descarga del talón**



### DESCARGA DEL TALÓN INTEGRADA

- **Funcionalidad:** disminución de los valores de presión por diferentes firmezas adaptadas a cada zona del cuerpo.
- **Eficacia:** ayuda al tratamiento de escaras de nivel 1 y 2. Mejora del flujo vascular a nivel del talón por inclinación integrada en la zona de los pies.
- **Seguridad:** reducción al mínimo de riesgo por una protección integral técnicamente probada.
- **Confort:** acompañamiento de los movimientos del cuerpo.



Opción  
con funda CIC



## Colchón multizona con descarga talonera

### Espuma viscoelástica

(Altura 6 cm)  
Densidad 80 kg/m<sup>3</sup>

#### Multizona



Blanda Firme Media

### Firmeza espuma visco

- Blanda: 1'5 kPa
- Media: 1'7 kPa
- Dura: 1'9 kPa

VMA64



VMA63



VMA62




### Peso del colchón

- VMA62: 14 kg
- VMA63: 15 kg
- VMA64: 16 kg

### Base de Espuma Alta Resiliencia


(Altura 8 cm)  
Densidad espuma HR:  
- VMA62: 18 kg/m<sup>3</sup>  
- VMA63: 28 kg/m<sup>3</sup>  
- VMA64: 34 kg/m<sup>3</sup>

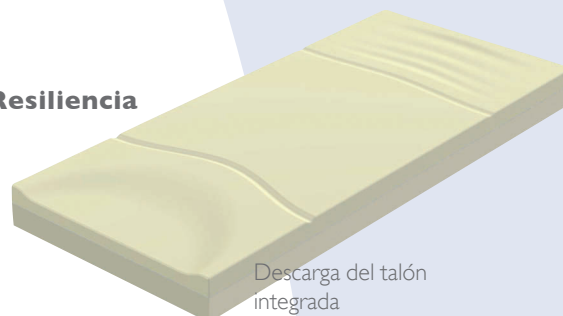

Descarga del talón integrada

- **Reducción óptima de las presiones en las zonas de riesgo.** Gracias a la descarga del talón y a las zonas con firmeza diferenciada.

Ejemplo: reparto de las presiones a nivel del talón en un paciente de 1,76 m y 70 kg. (Unidad: mm de Hg).

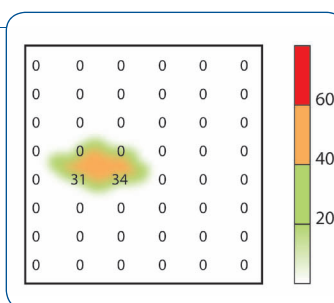

Colchón SIN descarga del talón. Colchón ALOVA monobloc multizona CON descarga del talón.

## PALET BOX

- **Práctico:** los colchones están listos para su empleo.
- **Ecológico:** reduce el volumen de residuos.



## ENROLLADO COMPRIMIDO (RC)

- **Ergonómico:** ligero, fácil de transportar (asa para su transporte).
  - **Ecológico:** aumenta la capacidad de transporte del vehículo.
- Desenrollar antes de fecha indicada en embalaje (Aprox. 6 meses)



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA SEGÚN PRESENTACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO |                         |  | DIMENSIONES (cm) | PESO PACIENTE | NORMAS PROTECCIÓN FUEGO                 | DENSIDAD             |
|---|---|-------------------------|--|------------------|---------------|---|----------------------|
|   | CAJA  | PALET BOX (10 unidades) | ENROLLADO COMPRIMIDO   |                  |               |   |                      |
| <b>ALOVA DT monobloc multizona, funda Promust PU</b>    | ----  | VMA62-HIP3-190          | VMA62RC1-HIP3-190 (1 ud)   | 190x88x14        | 20 a 120 kg   | EN 597-1 et 2<br>GPEN D I 90<br>clase D | 80 kg/m <sup>3</sup> |
| <b>ALOVA DT monobloc multizona, funda Promust PU</b>    | VMA62C-HIP  | VMA62-HIP               | VMA62RC1-HIP (1 ud)<br>VMA62RC-HIP (5 uds)   | 195x88x14        | 20 a 120 kg   |   |                      |
|   | VMA62C-HIP3                                       | VMA62-HIP3              | ----   |                  | 20 a 150 kg   |   |                      |
|   | VMA63-HIP   | VMA63HIP-BOX            | VMA63RC1-HIP (1 ud)<br>VMA63RC-HIP (5 ud)<br>VMA63RC1-HIPH3 (1 ud)<br>VMA63RC-HIPH3 (5 ud) |                  |               |   |                      |
| <b>ALOVA DT monobloc multizona, funda Promust PU HD</b> | VMA63HIPH   | VMA63HIPH-BOX           | VMA63RC1-HIPH3   | 20 a 150 kg      |               |   |                      |
|   | VMA64HIPH   | VMA64HIPH-BOX           | VMA64RC1-HIPH (1 ud)<br>VMA64RC-HIPH (5 uds)   | 20 a 180 kg      |               |   |                      |
| <b>ALOVA DT monobloc multizona, funda CIC</b>           | VMA63CIC  | VMA63CIC-BOX            | ----   | 20 a 150 Kg      |               |   |                      |
|   | VMA64CIC  | VMA64CIC-BOX            | ----   | 20 a 180 kg      |               |   |                      |

Mantenimiento  
Promust PU (HD)  
Promust CIC



3 años de garantía.  
En colectividades la garantía de la funda es de 1 año.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España  
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.