

MOTORBETRIEBENE MATRATZE AUTOMATISCH UND INTELLIGENT

axtair automorpho[®] **ensor**[®]
technology

mit therapeutischer Lufthöhe 12 cm **AT12** oder 15 cm **AT15**

HILFSMITTEL ZUR DEKUBITUSBEHANDLUNG IN DEN STADIEN I BIS 4

Beim jüngsten Modell der **AXTAIR** Produktreihe, das sich das patentierte Verfahren der Bestimmung des Luftdrucks der Morphologie des Patienten entsprechend zunutze macht, handelt es sich um die vollautomatische, intelligente Matratze Axtair automorpho **ensor**[®]. Sie bietet folgende Vorteile:

- **VERBESSERUNG** der therapeutischen Behandlung der Patienten
- **GARANTIE** der Sicherheit von Patienten, Pflegepersonal und Betreuern
- **OPTIMIERUNG** der Ressourcenverwaltung
- **NACHWEIS** darüber, welche Behandlung erfolgte.




ensor[®]
technology

- Erkennung
- Analyse
- Kommunikation
- Entscheidungshilfe (Reporting)
- Tracking



FERSENSTÜTZEN

- Möglichkeit der Entleerung der 4 Kammern im Fußbereich der Matratze.

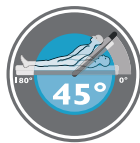

AXENSOR

- Automatische und permanente Anpassung des Aufblasdrucks in flacher Position und je nach Neigung des Rückenteils des Bettes.

CIC-BEZUG

- Verschweißter Bezug mit antibakterieller Behandlung durch Silberionen (Schutz vor Kreuzkontaminationen).



- LEICHTES HERAUSNEHMEN**
- des luftgefüllten Teils mittels zweier Reißverschlüsse (einer am Fußteil und einer am Kopfteil der Matratze) für die Reinigung und die Desinfektion.




STECKER CPC/DATA

- Automatischer Verschluss der Luftkreisläufe bei Abschaltungen.
- Verbindung Matratze-Kompressor.



Schnittstelle Kompressor

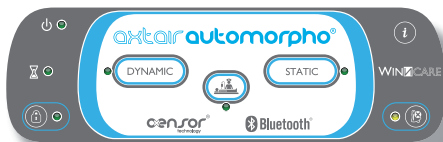

Die Anwendung **Axensor® Connect** ermöglicht die automatische Generierung eines Kontrollberichts für ein optimales Tracking über eine gesicherte Internetplattform:

- Technische Betriebsparameter
- Historie
- Autotest
- Übereinstimmung
- Richtiger Einsatz des Supports

Kompatibel mit Windows Versionen XP, 7 und 8 (außer Windows 8 RT)



TECHNISCHE DATEN

BEZEICHNUNG	ART.-NR.	MASSE in CM	PATIENTEN-GEWICHT	RELEVANTE NORMEN	SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN
AXTAIR AUTOMORPHO AT 12 AXENSOR TECHNOLOGY (KOMPRESSOR + MATRATZE)	VAXT6/AUTO	KOMPRESSOR 22 X 25 X 11,5 cm MATRATZE 195 X 87 X 17 cm	30 bis 165 kg	IEC 60601-1 Ed.3 IEC 60601-1-2 EN 597-1&2 und GPEN DI-90 & DI-89bis	KOMPRESSOR BLUETOOTH Durchsatz max: 8l / min Wechselmodus von 1 Kammer auf 2 alle 7 Minuten Zykluszeiten alle 14 bis 20 Minuten Stromversorgung: 220-240V 50 Hz Sicherung T 0,63A H 250V Durchschnittlicher Verbrauch 5 Watt/h Schalleistung: < 35dBa MATRATZE Kreislensensor Axensor Separate, abnehmbare Kammern aus PU-Ether L 87 cm 300µ bei AT 12 320µ bei AT 15 3 statische Kammern im Kopfbereich CPR --> Schnellentleerung in weniger als 15 Sek. Bezug CIC, rutschfest Unterlage aus Schaumstoff + 5cm
AXTAIR AUTOMORPHO AT 15 AXENSOR TECHNOLOGY (KOMPRESSOR + MATRATZE)	VAXT6/MAX	KOMPRESSOR 22 X 25 X 11,5 cm MATRATZE 195 X 87 X 20,5 cm	30 bis 180 kg	IEC 60601-1 Ed.3 IEC 60601-1-2 EN 597-1&2 und GPEN DI-90 & DI-89bis	
SCHNELLFÜLLPUMPE	VKIT/AXT	-	-	-	Kompatibel Axtair ONE / AUTOMORPHO / AUTOMAX / AUTOMORPHO AXENSOR Ermöglicht das Aufblasen und Entleeren einer Matratze in weniger als einer Minute.

Pflege: Bezüge Promust CIC:
Reinigung und Desinfizierung in
Übereinstimmung mit dem RABC-System.



Garantie: 2 Jahre, 4 Jahre für den Bezug CIC

ASKLÉ SANTÉ Groupe Winnicare – 200 rue Charles Tellier – ZI de Grézan – 30034 Nîmes Cedex 1 - Frankreich

Tel.: +33 (0)4 66 02 15 15 – Fax: +33 (0)4 66 02 15 28 – Email: contact@askle.com

www.winnicare.fr

Im Bestreben einer konstanten Verbesserung seiner Produkte
behält sich ASKLÉ SANTÉ vor, ohne Vorankündigung Änderungen der technischen Daten vorzunehmen - Fotos kein Vertragsbestandteil.