

axtar **XXL**[®]

**EL XXL SOLUCIÓN INNOVADORA PARA PACIENTES CON
ÚLCERAS POR PRESIÓN O CON ALTO RIESGO**



Prevención UPP de riesgo Medio a Alto.
Para pacientes encamados de 10 a 15 horas al día.
Peso del Paciente: 100 a 270 Kg.
2 medidas de ancho: 120 cm o 140 cm

WIN  CARE

axtar[®] XXL



COMPRESOR

Sistema patentado de cálculo automático y continuo de inflado por presión.

- De acuerdo a la morfología del paciente
- Tecnología basada en la presión alterna 1 celda en 2.
- 3 modos de funcionamiento: **dinámico, bajo presión estática, cuidado.**
- Ajustes de confort: ajuste personalizado del nivel de inflado y ajuste de la posición del asiento.
- Alarma visual y auditiva.
- Compatible con el programa AIRCARE.

Código QR para un simple y rápido acceso a la información del producto.

- Número de serial y referencia del producto.
- Folleto, descripción técnica, guía del usuario, preguntas frecuentes, Autotest



CPR (Resanimación Cardíaca Pulmonar)

- > Para desinflar el colchón en menos de 15 segundos.



FUNDA PROMUSTRUPHD

- > Parte superior: Extraíble, transpirable, impermeable a los líquidos y antimicrobiana.
- > Parte inferior: base antideslizante.


BORDE FIRME

- > Para una buena estabilidad al levantar y transferir



Se entrega en una bolsa de transporte

CE

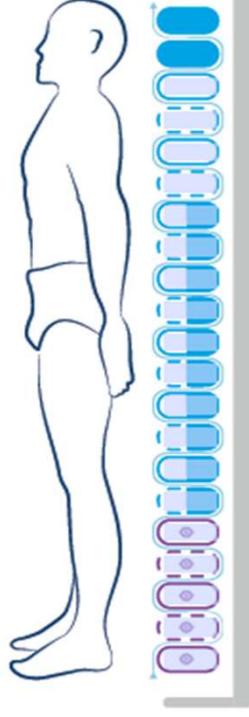


4 ÁREAS TERAPÉUTICAS:

- > 2 celdas de cabeza estáticas.
- > 4 celdas cervico-dorsal.
- > 10 células alrededor de la zona del sacro con una base de aire para asegurar la estabilidad.
- > 5 celdas con alivio de presión independiente y disponible



BOUCHON DE TRANSPORTE

Tapón de transporte: Sistema de apertura y reparto de 2 canales de aire (autonomía de 8 horas)

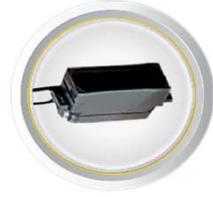

CELDAS

21 Células de poliuretano extraíbles e independientes de 20 cm de AIRE terapéutico.



EL **plus** DEL PRODUCTO

plus EFECTIVIDAD TERAPÉUTICA

- Manejo de la posición sentada
- Cálculo automático y continuo de la presión de inflado
- Liberadores de carga en posición de talón de serie
- 2 modos terapéuticos : baja presión estática o alternativo (1 celdas a 2)

plus FÁCIL DE USAR

- Interface del compresor intuitivo
- Instrucciones de uso simplificadas para el compresor
- Asistencia técnica de diagnóstico con código QR
- Modo de enfermería para los cuidadores

plus CONFORTABLE

- Ajuste de la comodidad sea cual sea el modo utilizado o la posición del paciente.
- 2 anchuras disponibles
- Borde firme para una buena estabilidad al levantar y transferir.

plus SEGURO

- Bloqueo automático de teclado
- Opción de pasacables

plus ECO-AMIGABLE

- Proceso eco-diseño

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	DIMENSIONES	PESO PACIENTE	NORMAS FUEGO	CARACTERÍSTICAS
 <p>(compresor + colchón) Funda integral de Promust PU HD Para camas de 120 cm</p>	VAXT/XXL-120	195 x 117 x 20.5 cm	100 a 270 Kg	EN 597-1 & 2 GPEN D1 90 Clase D	<p>Colchón</p> <p>21 Poliuretano desmontables e independientes Celdas de éter (300 u) de 20 cm de AIRE terapéutico</p> <p>4 zonas terapéuticas: 2 celdas estáticas de la cabeza, 4 celdas cervico-dorsales, 10 celdas alrededor de la zona del sacro con base de aire, 5 celdas de alivio del talón</p> <p>Compresor</p> <p>Dimensiones : 22 x 25 x 11.5 cm Peso : 2.7 kg</p> <p>Tecnología basada en la presión alterna: 1 celda en 2 durante un ciclo completo de 14 a 20 minutos</p> <p>Sistema patentado de cálculo automático y continuo de la presión de inflado</p> <p>Ajuste del confort</p> <p>Alarmas visuales y sonoras</p> <p>Flujo > 8/min</p> <p>Suministro de electricidad: 220 - 240 V - 50 Hz</p> <p>Clase II tipo BF</p> <p>Consumo medio 5 Wh</p> <p>Decibelios del compresor: Presión acústica según NF EN3744: <35 dBA</p> <p>Conformidad eléctrica y electromagnética según las normas IEC 60601-1 Ed.3; IEC 60601-1-2</p>
 <p>(compresor + colchón) Funda integral de Promust PU HD Para camas de 140 cm</p>	VAXT/XXL-140	195 x 137 x 20.5 cm			

2 años de garantía

Mantenimiento de las fundas Promust PU HD y Promust CIC



Este documento está destinado a los proveedores de servicios y distribuidores de material médico y a los profesionales del sector sanitario.

WIN CARE

DEPARTAMENTO COMERCIAL

+ 34 (0) 961.56.5521

E-mail: ventas@winncare.es

www.winncare.es

FABRICADO EN

WINNCARE FRANCIA

Askle Santé

Clase 1 DISPOSITIVO MÉDICO de acuerdo con la Directiva Europea 93/42/EEC.