

KISSEN ALOVA®

GEWÖLBT



ANATOMISCH GEFORMTES KISSEN MIT INTEGRIERTER STEISS-
BEIN-ENTLASTUNG AUS VISKOELASTISCHEM MATERIAL. FÜR
PERSONEN MIT EINEM KÖRPERGEWICHT BIS ZU 200 KG.

- **Wirksamkeit:** Das viskoelastische Material ALOVA® fördert das Einsinken von Körperpartien, die mit der Unterlage in Berührung kommen, wodurch der maximal einwirkende Druck vermindert wird.
- **Sicherheit:** Sitzmulde im Kissen verhindert das „nach vorn Rutschen“; integraler -Schutzbezug mit rutschfester Unterseite.
- **Komfort:** Thermoregulierende Eigenschaften des Textilbezugs aus Promust PU.

- **Neu:** Druckentlastung im Steißbeinbereich vermindert das Dekubitusrisiko. Minimierung des Dekubitusrisikos im Bereich des Sitzbeins (Höhe > 6cm)



ALOVA® KISSEN GEWÖLBT


Wirksamkeit:

- Effektive Dekubitus-Vorbeugung im Bereich des Steiß- und Kreuzbeins.
- Mehr als 6 cm Dicke an der Sitzmulde: Verbesserte Dekubitus-Vorbeugung im Bereich des Ischiasnervs.

Ergonomie:

- 16 Größen und 3 Höhen: für Patienten mit einem Gewicht von max. 200 kg.
- Erhöhter Bereich für das Becken, um das „nach vorn Rutschen“ zu verhindern

- Kennzeichnung der Kissenmaße auf dem Schaumstoff.
- Rutschfeste Unterseite.
- Abnehmbarer Schutzbezug.
- Griff an der linken Unterseite des Kissens: geringeres Risiko von Rissen und bessere Hygiene.

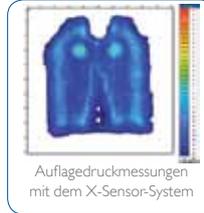

Grafische Darstellung der Druckverteilung (bei einem Patienten mit 80 kg/172 cm)

ERGONOMISCHES ALOVA® KISSEN

- Bewegliche Würfel unterstützen die Körperbewegungen und verbessern die Luftzirkulation.
- Einheitsgröße: 43 x 43 x 9 cm.
- Thermoregulierung aufgrund der Durchlässigkeit des Schutzbezugs für Feuchtigkeit und der Luftzirkulation zwischen den Würfeln.
- Verringerung des einwirkenden Drucks durch Einsinken in den Alova SCHAUMSTOFF.



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

BESCHREIBUNG	REFERENZ	BREITE CM	TIEFE CM	HÖHE IN CM MIN./ MAX.*	GEWICHT DES PATIENTEN (KG)	BEZUG	NORMEN ZUR FEUERBESTÄNDIGKEIT	
ALOVA® Ergonomisch mit 2 Bezügen**	VCAEM	43	43	9	25 bis 100	Integraler-Schutzbezug aus Promust PU; Polyurethanbeschichtetes Jersey; Rutschfeste Unterseite aus PU/PVC.	EN 597-1 EN 597-2	
ALOVA® Standard gewölbt mit 2 Bezügen**	VCAG4343	43	43	6 / 9	30 bis 100	Integraler-Schutzbezug aus Promust PU (polyurethanbeschichtetes Jersey; schwarze Oberseite, silberne Seitenpartien).		
ALOVA® Gewölbt in zahlreichen Größen mit 2 Bezügen**	VCAG4540	45	40	6 / 9	30 bis 120			
	VCAG3841	38	41	6 / 9	30 bis 90			
	VCAG4041	40	41	6 / 9	30 bis 90			
	VCAG4341	43	41	6 / 9	30 bis 100			
	VCAG4043	40	43	6 / 9	30 bis 90			
	VCAG4544	45	44	6 / 9	30 bis 120			
	VCAG5044	50	44	6 / 9	30 bis 135			
ALOVA® Gewölbt Ausführung XL mit 2 Bezügen**	VCAG4343XL-E	43	43	9 / 12	30 bis 110			Innenseite rutschfest, PU/PVC, mit Transportgriff.
	VCAG5040XL-E	50	44	9 / 12	30 bis 135			
ALOVA® Gewölbt Ausführung XXL mit 2 Bezügen**	VCAG5250	52	49	7 / 10	120 bis 160			
	VCAG5450	54	50	7 / 10	120 bis 160			
	VCAG5650	56	50	7 / 10	120 bis 200			
	VCAG6050	60	50	7 / 10	120 bis 200			
ALOVA® Gewölbt Erhöhter Bereich für das Becken mit 2 Bezügen**	VCAG3841BP	38	41	6 / 9	30 bis 90			
	VCAG4041BP	40	41	6 / 9	30 bis 90			
	VCAG4341BP	43	41	6 / 9	30 bis 100			
	VCAG4343BP	43	43	6 / 9	30 bis 100			
	VCAG4544BP	45	44	6 / 9	30 bis 120			
	VCAG5044BP	50	44	6 / 9	30 bis 135			
	VCAG4347BP	43	47	6 / 9	30 bis 120			

* minimale Höhe = Höhe des Kissens, von der Mulde aus gemessen / maximale Höhe = Gesamthöhe des Kissens. **Garantie auf das Kissen: 3 Jahre.**

Schutzbezug ist mit krankenhaushüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln kompatibel.

** Schreiben Sie -E am Ende jeder Referenz um einen einzigen Schutzbezug zu erhalten

Reinigung: Bezug aus Promust PU

ASKLÉ SANTÉ Groupe Winnicare – 200 rue Charles Tellier – ZI de Grézan – 30034 Nîmes Cedex 1 Frankreich
Tel.: +33 (0)4 66 02 15 15 – Fax: +33 (0)4 66 02 15 28 – E-Mail: contact@askle.com

www.winnicare.fr

ASKLÉ SANTÉ möchte seine Produkt stetig verbessern und behält sich daher das Recht vor, technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern – Fotos nicht verbindlich.

WINNCARE
g r o u p

by

ASKLÉSANTÉ