



**SYSTÈMES
DE TRANSFERT**

DESIGN
ET
CONCEPTION
DANOIS



LE TRANSFERT MOBILE DES PERSONNES EN INSTITUTION

EXPERTISE PRODUCTS

SOLUTIONS THÉRAPEUTIQUES

EXPERTISE SERVICES



WIN  CARE



SOLAR 185

UN SYSTÈME DE TRANSFERT PASSIF POUR LES PATIENTS DÉPENDANTS

rotation
360°

Système breveté
(N° de brevet EP 1445791 B1)
d'accroche des sangles


Etrier 4 points
spécifiques

Deverrouillage manuel
du verin en cas
d'urgence

Télécommande
de contrôle

Poignées
ergonomiques

Boîtier de contrôle
LINAK

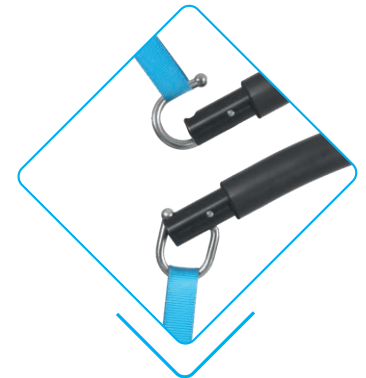

Simple
et Sécurisé



Mât

Piètement
à ouverture
électrique



Relevage du sol

+ SOLAR 185

Sécurité / Ergonomie / Design

PRATIQUE

- Hauteur variable électrique
- Amplitude de levage depuis le sol : 680 à 1980 mm
- Capacité de levage : 185 kg
- Ouverture/fermeture électrique du piètement
- Roues à faible pouvoir de résistance

SÉCURITAIRE

- Système d'accroche des sangles breveté
- Structure résistante pour une utilisation intensive
- Voyant d'état de charge de la batterie sur la télécommande
- Alerte anti-surcharge
- Avertisseur de maintenance annuelle
- QR code avec lien vers la notice et une vidéo d'utilisation

Les Sangles

Sans têteère

Avec têteère

Universal Basic

Pour le transfert des patients ayant une instabilité du tronc



Universal Confort

Pour le transfert des patients avec handicaps lourds



Universal Amputés

Pour le transfert des patients amputés



Toilettes

Pour le transfert vers les toilettes




Dossier bas

Pour le transfert des patients avec un maintien du tronc et de la tête



6 TAILLES DE SANGLES PAR REFERENCE

XS S M L XL XXL

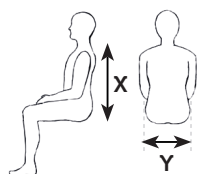

	XS	S	M	L	XL	XXL
Y (distance entre les hanches)	37 cm	42 cm	48 cm	52 cm	68 cm	78 cm
X (distance entre cou et assise)	50 cm	55 cm	66 cm	75 cm	75 cm	75 cm



Chaque sangle est munie d'un QR code renvoyant vers une vidéo et un manuel d'utilisation.

SWL 275kg






STELLAR 170

UN SYSTÈME DE TRANSFERT PARTICIPATIF POUR LES PATIENTS EN PERTE D'AUTONOMIE



Système breveté
(N° de brevet EP 1445791 B1)
d'accroche des sangles

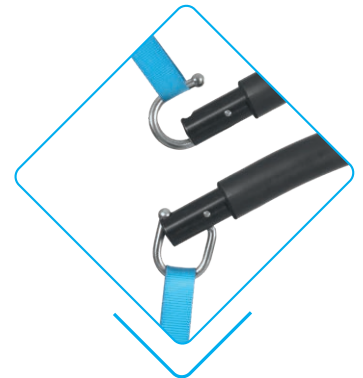

Simple
et Sécurisé



Hauteur variable

+ STELLAR 170

Sécurité / Ergonomie / Design

PRATIQUE

- Hauteur variable électrique
- Amplitude de levage : de 800 à 1600 mm
- Capacité de levage (170 kg)
- Ouverture/fermeture électrique du piètement
- Support jambes réglable en hauteur et profondeur
- Poignée de prehension pour le patient

SÉCURITAIRE

- Système de fixation des sangles breveté
- Voyant d'état de batterie sur la télécommande
- Alerte anti-surcharge
- Avertisseur de maintenance annuelle
- QR code avec lien vers la notice et une vidéo d'utilisation

Les Sangles **ergo** slings

Sangle de verticalisation
1 boucle



Sangle de verticalisation
2 boucles (pour les patients corpulents)



DANS QUELS CAS DOIT-ON UTILISER UN LÈVE-PATIENT (SOLAR) OU UN APPAREIL DE VERTICALISATION (STELLAR) ?

Les lève-patients et les verticalisateurs répondent à des utilisations différentes.

On utilise l'un ou l'autre suivant les pathologies des patients et les transferts effectués.

Pathologies de patient



SOLAR 185



STELLAR 170

Paraplégique	OK	OK si tonicité du tronc et aide avec les membres supérieurs
Hémiplégique	OK	OK si tonicité du tronc et aide avec le membre supérieur valide
Tétraplégique	OK	X
Diminution des capacités physiques	OK	Recommandé
Membres inférieurs amputés		
1	OK	OK si tonicité du tronc
2	OK	X
Membres supérieurs amputés		
1	OK	OK si tonicité du tronc et aide avec le membre supérieur valide
2	OK	X

Transfert

allongé à allongé	OK	X
allongé a assis	OK	X
assis à assis	X	OK
effectuer un change ou une toilette	X	OK
verticaliser*	X	OK

*prévention de l'escarre ou rééducation à la marche



Il faut rester très mesuré dans l'utilisation de l'un ou l'autre des appareils de transfert. Les lève-patients sont à réserver aux transferts de personnes dépendantes. Alors que les verticalisateurs sont recommandés pour les transferts de personnes en perte d'autonomie.

Caractéristiques techniques et références



SOLAR 185

Charge maxi patient	185 kg
Réglage de la hauteur	électrique
Ecartement des pieds	électrique
Abaissement d'urgence	manuel
Poids du Solar	45,2 kg
Autonomie batteries	40 - 60 cycles (avec un poids de 80 kg)

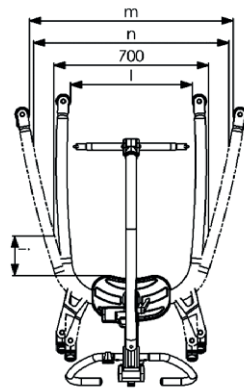
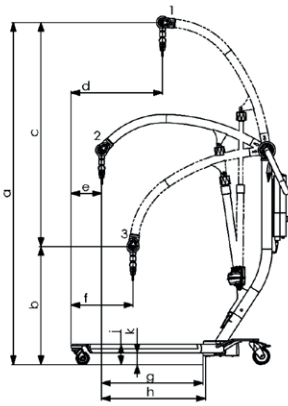


a	1980 mm	h	600 mm
b	680 mm	i	180 mm
c	1300 mm	j	120 mm
d	530 mm	k	50 mm
e	180 mm	l	550 mm
f	360 mm	m	920 mm
g	580 mm	n	890 mm



STELLAR 170

Charge maxi patient	170 kg
Réglage de la hauteur	électrique
Ecartement des pieds	électrique
Abaissement d'urgence	manuel
Poids du Stellar	51,6 kg
Autonomie batteries	40 - 60 cycles (avec un poids de 80 kg)

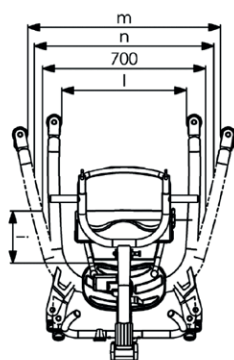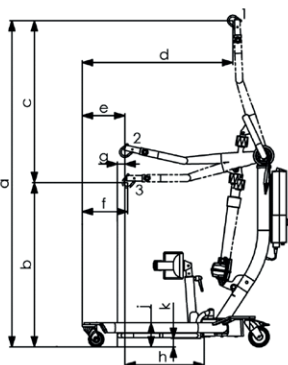

a	1600 mm	h	390 mm
b	800 mm	i	220 mm
c	800 mm	j	120 mm
d	740 mm	k	40 mm
e	210 mm	l	540 mm
f	220 mm	m	830 mm
g	40 mm	n	770 mm

Sangle Basic

Universal Basic Avec Tetière

Max 275kg  

Modèle	Référence
● Universal Basic HS XS	009-09823
● Universal Basic HS S	009-09824
● Universal Basic HS M	009-09825
● Universal Basic HS L	009-09826
● Universal Basic HS XL	009-09827
● Universal Basic HS XXL	009-09828

QR code
lien vers **video**



Universal Basic Avec Tetière, Mesh

Max 275kg  

Modèle	Référence
● Universal Basic HS Mesh XS	009-09833
● Universal Basic HS Mesh S	009-09834
● Universal Basic HS Mesh M	009-09835
● Universal Basic HS Mesh L	009-09836
● Universal Basic HS Mesh XL	009-09837
● Universal Basic HS Mesh XXL	009-09838

QR code
lien vers **video**



Universal Basic

Max 275kg  

Modèle	Référence
● Universal Basic XS	009-09803
● Universal Basic S	009-09804
● Universal Basic M	009-09805
● Universal Basic L	009-09806
● Universal Basic XL	009-09807
● Universal Basic XXL	009-09808

QR code
lien vers **video**



Universal Basic Mesh

Max 275kg  

Modèle	Référence
● Universal Basic Mesh XS	009-09813
● Universal Basic Mesh S	009-09814
● Universal Basic Mesh M	009-09815
● Universal Basic Mesh L	009-09816
● Universal Basic Mesh XL	009-09817
● Universal Basic Mesh XXL	009-09818

QR code
lien vers **video**



Sangle Confort

Universal Confort Avec Tetière

Max 275kg  

Modèle	Référence
● Universal Confort HS XS	009-09763
● Universal Confort HS S	009-09764
● Universal Confort HS M	009-09765
● Universal Confort HS L	009-09766
● Universal Confort HS XL	009-09767
● Universal Confort HS XXL	009-09768

QR code
lien vers **video**



Universal Confort Avec Tetière, Mesh

XS-XL
Max
275 kg

XXL-XXXL
Max
400 kg



Modèle	Référence
● Universal Confort HS Mesh XS	009-09773
● Universal Confort HS Mesh S	009-09774
● Universal Confort HS Mesh M	009-09775
● Universal Confort HS Mesh L	009-09776
● Universal Confort HS Mesh XL	009-09777
● Universal Confort HS Mesh XXL	009-09778
● Universal Confort HS Mesh XXXL*	009-09779

QR code
lien vers **video**



*(order-produced)

Universal Confort

Max 275kg  

Modèle	Référence
● Universal Confort XS	009-09843
● Universal Confort S	009-09844
● Universal Confort M	009-09845
● Universal Confort L	009-09846
● Universal Confort XL	009-09847
● Universal Confort XXL	009-09848

QR code
lien vers **video**



Universal Confort Mesh

Max 275kg  

Modèle	Référence
● Universal Confort Mesh XS	009-09853
● Universal Confort Mesh S	009-09854
● Universal Confort Mesh M	009-09855
● Universal Confort Mesh L	009-09856
● Universal Confort Mesh XL	009-09857
● Universal Confort Mesh XXL	009-09858

QR code
lien vers **video**



Sangles pour Amputés

Universal Amputee

Max 275kg  

Modèle	Référence
● Universal Amputee XS	009-09743
● Universal Amputee S	009-09744
● Universal Amputee M	009-09745
● Universal Amputee L	009-09746
● Universal Amputee XL	009-09747
● Universal Amputee XXL	009-09748

QR code
lien vers **video**



Universal Amputee Avec Tetière

Max 275kg  

Modèle	Référence
● Universal Amputee HS XS	009-09753
● Universal Amputee HS S	009-09754
● Universal Amputee HS M	009-09755
● Universal Amputee HS L	009-09756
● Universal Amputee HS XL	009-09757
● Universal Amputee HS XXL	009-09758

QR code
lien vers **video**



Sangles Dossier Bas

Low back


Max 275kg  

Modèle	Référence
● Low Back XS	009-09633
● Low Back S	009-09634
● Low Back M	009-09635
● Low Back L	009-09636
● Low Back XL	009-09637
● Low Back XXL	009-09638

QR code
lien vers **video**



Low back Mesh

Max 275kg  

Modèle	Référence
● Low Back Mesh XS	009-09783
● Low Back Mesh S	009-09784
● Low Back Mesh M	009-09785
● Low Back Mesh L	009-09786
● Low Back Mesh XL	009-09787
● Low Back Mesh XXL	009-09788







QR code
lien vers **video**



Toilettes

Toilet

Max 275kg  


Modèle	Référence
 Toilet sling XS	009-09543
 Toilet sling S	009-09544
 Toilet sling M	009-09545
 Toilet sling L	009-09546
 Toilet sling XL	009-09547
 Toilet sling XXL	09-09548

QR code
lien vers **video**



Sangles pour Verticalisateurs

Standing



Max 275kg  

Modèle	Référence
 Standing S	009-09594
 Standing M	009-09595
 Standing L	009-09596
 Standing XL	009-09597
 Standing XXL	009-09598

QR code
lien vers **video**



Standing 2-belts

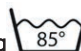Max 275kg  

Modèle	Référence.
 Standing 2-belts XS	009-09563
 Standing 2-belts S	009-09564
 Standing 2-belts M	009-09565
 Standing 2-belts L	009-09566
 Standing 2-belts XL	009-09567
 Standing 2-belts XXL	009-09568

QR code
lien vers **video**



WIN CARE



winncare.fr

