

# axtair one® plus



Wynik w skali Bradena



WYS  
OKI



## MATERAC

- ▶ 18 wymowanych i niezależnych komór z poliuretanu, powietrze terapeutyczne 12 cm
- ▶ podkład z pianki polieterowej 5 cm
- ▶ Zawór bezpieczeństwa CPR
- ▶ Korek transportowy z systemem otwierania i dzielenia 2 kanałów powietrznych (autonomia 8 godzin)




## DOSTĘPNE POKROWCE

- ▶ Górna strona: rozciągliwa, oddychająca, nieprzepuszczalna dla cieczy i przepuszczalna dla pary
- ▶ Dolna strona: powierzchnia antypoślizgowa
- ▶ dostępne są 2 pokrowce:
  - PROMUST PU
  - POKROWIEC PROMUST CIC: poliuretan / poliwęglan pokryty siatką poliamidową z dodatkiem jonów srebra, antypoślizgowy spód pokrowca



## POMPA

- ▶ Opatentowany układ automatycznego i ciągłego dostosowywania ciśnienia powietrza w materacu, w oparciu o budowę ciała pacjenta
- ▶ Technologia oparta na zmiennym ciśnieniu, 1 komora w 2
  - ▶ 1 tryb terapeutyczny: dynamiczny
    - ▶ Regulacja pozycji siedzącej
    - ▶ Regulacja komfortu
      - ▶ Alarmy wizualne i dźwiękowe
      - ▶ Numer seryjny na tylnej stronie pompy, uproszczona instrukcja oraz kod QR po obu stronach

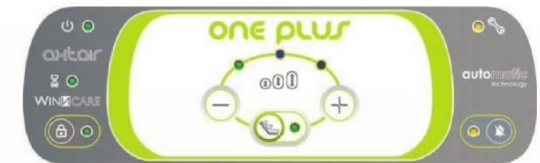

## WSKAZANIA

POMAGA W ZAPOBIEGANIU ODLEŻYNOM U PACJENTÓW O ŚREDNIM I WYSOKIM RYZYKU ICH POWSTAWANIA, PRZEBYWAJĄCYCH W ŁÓŻKU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 15 GODZIN DZIENNIE. POMAGA W LECZENIU ISTNIEJĄCYCH ODLEŻYN OD STOPNIA 1 DO 2.

CIĘŻAR PACJENTA: 30 do 150 kg

## ZALETY

- ▶ **Skuteczność terapeutyczna** u pacjentów z wczesnym stadium odleżyn
- ▶ **Łatwy w użyciu** dla opiekunów
- ▶ **Techniczna autodiagnostyka** za pomocą kodu QR
- ▶ **Gotowy do użycia** w torbie transportowej
- ▶ **Ekologiczny produkt, przyjazny dla środowiska naturalnego**
- ▶ **Produkt zaprojektowany i wyprodukowany we Francji**

OPIS	NR REFERENCYJNY	WYMIARY / WAGA	WAGA PACJENTA	NORMY DOTYCZĄCE ZAPALNOŚCI	KLUCZOWE FUNKCJE
AXTAIR ONE® PLUS (pompa + materac) Pokrowiec Promust PU na łóżko o szerokości 90 cm	VAXT2/ONE-P				Materac nawierzchniowy Zawór bezpieczeństwa CPR 18 wymowanych i niezależnych komór z poliuretanu, powietrze terapeutyczne 12 cm (300µ) podkład z pianki polieterowej 5 cm (gęstość 18 kg/m <sup>3</sup> ; twardość 3,5 kPa) <b>Pompa</b> Wymiary: 22 x 25 x 11,5 cm Ciężar: 2,7 kg Technologia oparta na zmiennym ciśnieniu, 1 komora w 2 w ciągu pełnego cyklu trwającego od 9 do 14 minut Opatentowany układ automatycznego i ciągłego dostosowywania ciśnienia powietrza w materacu Regulacja komfortu Alarmy wizualne i dźwiękowe. Natężenie przepływu > 7 l/min Zasilanie elektryczne: 220-240 V - 50 Hz Klasa II typ BF Średni pobór: 5 Wh Głośność pompy w decybelach: Poziom ciśnienia akustycznego, mierzony zgodnie z NF EN3744: <35 dBA Zgodność elektryczna i elektromagnetyczna według norm IEC 60601-1 Ed.3; IEC 60601-1-2
AXTAIR ONE® PLUS (pompa + materac) Pokrowiec Promust CIC na łóżko o szerokości 90 cm	VAXT2/ONE/CIC-P	195 x 87 x 17 cm (76,7 x 34,2 x 5,5 cali)	30 do 150 kg	EN 597-1 oraz 2 GPEMD1 90 Klasa D	

Instrukcja konserwacji: Pokrowce Promust PU i CIC



2 lata gwarancji

Fotografie nie są umownie wiążące

FF000096/02.2018

