

# HEBEVORRICHTUNG FÜR PERSONEN Winn'Motion 175



ENTSPRICHT DEN ANSPRÜCHEN DER EUROPÄISCHEN RICHTLINIE EN ISO 10535 : 2007 FÜR HEBEVORRICHTUNGEN UND TRANSFER VON BEHINDERTEN MENSCHEN.

## NEUES DESIGN

- Not-Stopp-Taste an der Seite
- Akustische Anzeige der Entladung von Batterien
- Gasfeder:
  - Elektrische Auskuppelung
  - manuelles Auskuppeln der Gasfeder anhand eines ergonomischen Rändelrads
- Lifter für Patienten mit einem Gewicht bis 175 kg



## FÜR PERSONEN MIT EINEM GEWICHT BIS 175 KG


### Fahrgestell über Fußpedale manuell gespreizt

#### Sicherheit:

- Gepolstertes Spreizbügel, mit Anti-Rückschlagsystem gesichert
- Kontrollkasten mit Not-Stoppe Taste
- Tonsignal beim Wiederaufladen der Batterien
- Elektrisches Notabsenkungssystem
- Auskuppeln der Gasfeder durch ergonomisches Rändelrad
- Energiespeicher der Batterie für 40 Zyklen (24 Volt) (1 Zyklus = 1 Hochfahren / 1 Herunterfahren), Ladezeit: 8 bis 10 Stunden

#### Praktisch:

- Leicht und kompakt für zuhause und öffentliche Einrichtungen
- Einfache Zerlegung in 2 Teile
- Einfach zu transportieren und zu lagern
- Leichte Handhabung: Lenkrollen Ø 75 mm vorne und Ø 100 mm hinten
- Gewicht: 36 kg
- Drehung des Spreizbügels: 360°

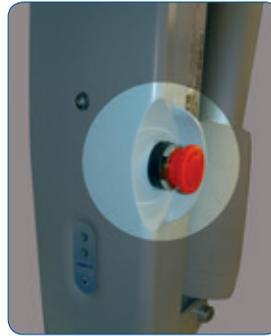

Not-Stoppe Taste



4-Punkt Spreizbügel



Verschiedene Einstellungen der Gurte dank farbiger Markierungen.

### Händelbarkeit des Winn'Motion 175



Transfer vom Bett





Umsetzen in sitzende Position



Hebeaufnahme vom Fussbodenniveau

Erhältliche Gurte: BAIN - CONFORT - HAMAC

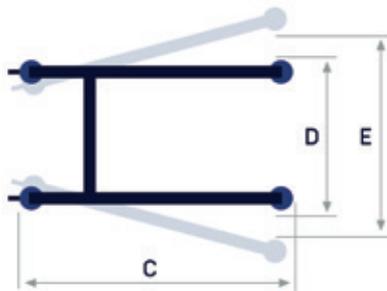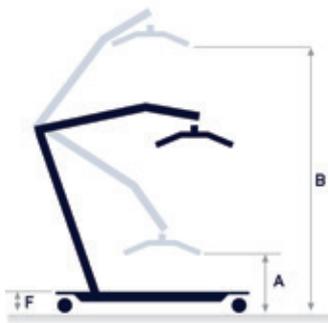

Option: Patientenwaage Klasse III, Kapazität (175 kg, Präzision **0,100 g**)

BEZEICHNUNG	A	B	C	D	E	F	MAXIMALES GEWICHT DES PATIENTEN	VORDERRÄDER	HINTERRÄDER	NORMEN	MOTORISIERUNG	GEWICHT
WINN'MOTION 175	59 49	185 175	110	65	84	12	175 kg	75	100	ISO 10535	LINAK IP 54	36 kg

5 Jahre Garantie auf elektrische, mechanische Teile, und Fernbedienung.  
1 Jahr Garantie für Akku.

MÉDICATLANTIC Groupe WinnCare - 85670 Saint-Paul-Mont-Petit - Frankreich  
Tel.: +33 (0)2 51 98 55 64 - Fax: +33 (0)2 51 98 59 07 - E-Mail: info@medicatlantic.fr

www.winnCare.fr

In dem Bestreben der permanenten Verbesserung seiner Produkte behält ASKLÉ sich das Recht vor, die technischen Merkmale ohne Vorankündigung zu ändern - Fotos nicht verbindlich.